


## Masque de luminothérapie LED sans fil

### Instructions

Read instructions thoroughly before use.

### Emballage du produit

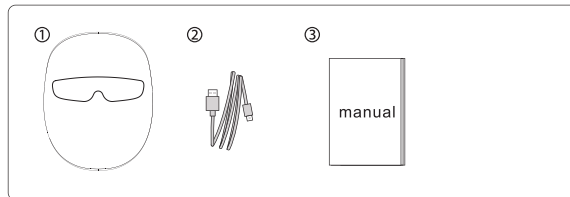

- ① Masque                      ② Câble de charge USB  
③ Manuel

### Mode d'emploi



Veillez terminer de nettoyer votre visage avant chaque utilisation du masque de luminothérapie LED, avant de porter le produit. (Vous pouvez également utiliser le masque de luminothérapie LED après avoir appliqué vos produits de soin sur le visage.) Il est recommandé de l'utiliser une fois par jour pendant 15 à 30 minutes.

Maintenez le bouton marche/arrêt du masque enfoncé pour l'allumer ou l'éteindre. Les LED changent de couleur dans l'ordre suivant : rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, à chaque pression sur le bouton. Sélectionnez la couleur adaptée à vos besoins et commencez votre routine de soin de la peau.

**Attention** : une fois le masque activé, appuyer à nouveau sur le bouton peut l'éteindre ou modifier la couleur de la lumière.

### Précautions d'utilisation

Ce masque utilise la lumière LED pour prendre soin de la peau de manière sûre, simple et efficace. Il stimule l'activité cellulaire, favorise le métabolisme, augmente l'élasticité, réduit les rides et les taches, et rajeunit la peau. Réutilisable, il permet un soin complet à domicile, en aidant la peau à produire naturellement du collagène et des tissus fibreux pour se régénérer.

7 couleurs de lumière et leurs effets :

**Rouge (630 nm)** : Stimule les cellules, accélère le métabolisme et la production de collagène. Idéal pour le rajeunissement, l'éclaircissement de la peau, la réduction des rides et des pores, et pour améliorer l'élasticité.

**Bleu (470 nm)** : Anti-acné et anti-inflammatoire. Détruit efficacement les bactéries responsables de l'acné sans abîmer la peau, favorisant une guérison rapide et sans cicatrices.

**Vert (520 nm)** : Équilibre et stabilise la peau, réduit l'excès de sébum, soulage le stress cutané et améliore la circulation lymphatique.

**Jaune (590 nm)** : Revitalise les cellules, stimule la détoxification, améliore la texture de la peau, réduit rougeurs et rides superficielles, et renforce l'immunité cutanée.

**Violet** : Combinaison de rouge et bleu, parfaite pour traiter l'acné et les cicatrices, en combinant les bienfaits des deux lumières.

**Bleu clair & vert** : Stimule progressivement l'énergie cellulaire et le métabolisme, favorisant une peau plus saine et éclatante.

**Blanc / Laser** : Pénètre profondément pour accélérer le métabolisme des tissus, réduire les pigments, améliorer les ridules et le relâchement cutané.

Ce masque est pratique, abordable et adapté à tous types de peau. Il offre une solution complète pour le rajeunissement, l'éclaircissement, la réparation et le soin anti-âge, tout en restant facile à intégrer dans votre routine quotidienne.

### Product parameters

Nom du produit	Masque LED télécommandé
Modele	
Tension de charge	5V $\approx$ 1A
Puissance nominale	1W
Batterie	3.7V / 800mAh
Temps de charge	2 heures
Taille du produit	230*180*85mm

### Méthodologie de gestion du produit

#### ► Instructions d'entretien

Après utilisation du produit, essuyez ou séchez la zone en contact avec la peau à l'aide d'un coton imbibé de lotion tonique ou d'un chiffon en coton. Vous pouvez également nettoyer avec une serviette ou un mouchoir.

Comme ce produit n'est pas étanche, ne le lavez pas avec de l'eau ou tout autre liquide.

► Pour le rangement

Conservez le masque en position verticale.  
Attention : le masque n'est pas amovible. Ne tirez pas fortement sur le cordon de connexion.

Stockez-le à température ambiante.  
Évitez la lumière directe du soleil et ne le placez pas dans des endroits humides.  
Ne rangez pas le masque à proximité d'objets pointus pouvant l'endommager.

